

Instruções de utilização

Pipeta e Limpador para aparelho TABATABA®

As pipetas e os limpadores FIM MEDICAL são acessórios especificamente desenvolvidos para o aparelho TABATABA® (aparelho de deteção de monóxido de carbono (CO) no ar expirado).

Atenção: Utilização unicamente por um médico ou um profissional de saúde.

Atenção: Utilizar sempre um conjunto pipeta e limpador com o aparelho TABATABA®.



Instalação:

- Retirar o limpador e a pipeta da embalagem
- Não tocar na parte bucal da pipeta com os dedos, mas segurá-la pela estrutura
- Montar a pipeta no limpador e o conjunto no aparelho

Utilização:

- Mudar sistematicamente a pipeta de utilização única entre cada paciente.
- Mudar sistematicamente o limpador de utilização única entre cada paciente
- **Atenção:** risco de contaminação cruzada em caso de reutilização dos consumíveis de utilização única
- Com um pano, limpar o detetor CO com um produto bactericida fungicida sem álcool
- Não inspirar na pipeta (risco de contaminação)

Eliminação dos resíduos:

Os acessórios contaminados devem fazer parte de uma recolha seletiva para resíduos biologicamente contaminados (DASRI).

Características:

Pipeta	⊗ Utilização única
Limpador	⊗ Utilização única
Embalagem	Saco compartimentado não estéril
Data limite de utilização	Ver etiquetagem da caixa
Armazenamento / transporte	T°: entre 0°C e 50°C Humidade: 75% máx.
Classe médica	Classe I

Ano da primeira aposição da marcação CE: 2007

Marcações:

Marcação CE RDM 2017/745

Identificação do fabricante

Data de fabricação

Consultar os documentos de apoio

N.º de lote

Data limite de utilização

Limite de higrometria

Utilização única

Temperatura de armazenamento: entre 0 e 50°C


Instruction sheet

Pipette and Trapper for TABATABA®

FIM MEDICAL pipettes and trappers are accessories developed specifically for the TABATABA® device (analyser of carbon monoxide (CO) in expired air).

Caution: U.S.A. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Caution: Always use a pipette and trapper with the TABATABA®.

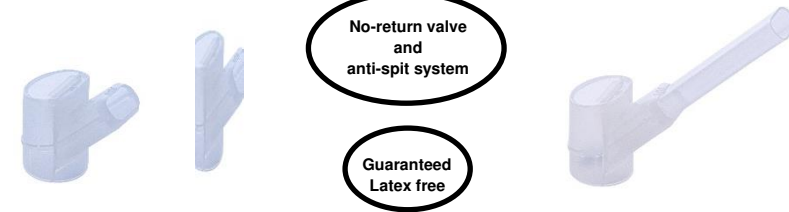

Installation:

- Remove the trapper and pipette from the packaging
- Do not touch the mouthpiece of the pipette with the fingers
- Insert the pipette into the trapper and connect the set to the device

Use:

- Systematically change the single use pipette between patients
- Systematically change the single use trapper between patients
- **Caution:** risk of cross contamination if disposable consumables are reused
- With a slightly damp cloth, clean the CO detector with a non-alcohol bactericide fungicide solution
- Do not breathe into the pipette (risk of contamination)

Disposal:

Used or dirty accessories must be disposed of with biological waste (DASRI).

Features:

Pipeta	⊗ Single use
Trapper	⊗ Single use
Packaging	Compartmentalized sachets non sterile
Expiry date	See cardboard box label
Storage / transport	T°: 0°C - 50°C Humidity: 75% max.
Medical class	Class I

First marketed: 2007

Labels:

CE Marking RDM 2017/745

Manufacturer identification

Date of manufacture

Consult the accompanying documents

Lot number

Expiry date

Humidity Level Limit

Single use

Storage temperature: between 0 and 50°C